

仕様

一般の名称	注射筒輸液ポンプ
販売名	トップシリンジポンプ TOP-S500
型式	TOP-S500
医療機器認証番号	302ALBZX00009000
クラス分類	クラスIII 高度管理医療機器 特定保守管理医療機器
電源	AC 電源 (商用): AC100 ~ 240V 50/60Hz 内蔵バッテリー: リチウムイオン電池、再充電可能 DC3.6V 3250mAh 型式: BP-A6LG 連続使用時間 約 10 時間 (ただし、新品の内蔵バッテリーを完全に充電した状態で、5mL/h 設定時) アルカリ乾電池: 単三形アルカリ乾電池 4 本 連続使用時間 約 10 時間 (ただし、新品のアルカリ乾電池で 5mL/h 設定時)
消費電流	0.3A
使用シリンジ	5、10、20、30、50mL シリンジ
シリンジメーカー (※トップ製および指定メーカーのシリンジ)	トップ、テルモ、ニプロ、JMS、1% ディプリバン注 - キット (20mL、50mL)、 ユーザー登録済みシリンジ
流量設定範囲	0.01 ~ 150mL/h (5mL シリンジ) 0.01 ~ 300mL/h (10mL シリンジ) 0.01 ~ 400mL/h (20mL シリンジ) 0.01 ~ 500mL/h (30mL シリンジ) 0.01 ~ 1200mL/h (50mL シリンジ) 0.01 ~ 1200mL/h (1% ディプリバン注 - キット 20mL・50mL) ----- 0.01 ~ 99.99mL/h: 0.01mL/h ステップ 100 ~ 1200mL/h: 1mL/h ステップ
予定量設定範囲	設定なし、0.1 ~ 999.9mL (0.1mL ステップ)
積算量表示範囲	0.0 ~ 999.9mL (0.1mL ステップ)
輸液精度*	機械的精度 : ±1% シリンジを含めた精度 : ±3% (1.0mL/h 以上の流量にて、1 時間以上輸液した後の 1 時間の精度)
早送り流量	100 ~ 150mL/h (5mL シリンジ) 100 ~ 300mL/h (10mL シリンジ) 100 ~ 400mL/h (20mL シリンジ) 100 ~ 500mL/h (30mL シリンジ) 100 ~ 1200mL/h (50mL シリンジ) 100 ~ 1200mL/h (1% ディプリバン注 - キット 20mL・50mL) ----- 1mL/h ステップ
ボラス流量	100 ~ 150mL/h (5mL シリンジ) 100 ~ 300mL/h (10mL シリンジ) 100 ~ 400mL/h (20mL シリンジ) 100 ~ 500mL/h (30mL シリンジ) 100 ~ 1200mL/h (50mL シリンジ) 100 ~ 1200mL/h (1% ディプリバン注 - キット 20mL・50mL) ----- 1mL/h ステップ
ボラス量	0.1 ~ 5.0mL (5mL シリンジ) 0.1 ~ 10.0mL (10mL シリンジ) 0.1 ~ 20.0mL (20mL シリンジ) 0.1 ~ 30.0mL (30mL シリンジ) 0.1 ~ 50.0mL (50mL シリンジ) 0.1 ~ 50.0mL (1% ディプリバン注 - キット 20mL・50mL) (0.1mL ステップ)

オプション

トップワンタッチボールクランプ タイプAS



角度変更が可能なワンタッチボールクランプ



トップボールクランプタイプCS



- **TOP**、**トップ**、**THE TOP IN QUALITY** は(株)トップの登録商標です。
- 製品改良にともない予告なく仕様、外観などを変更させていただく場合がありますので、ご了承ください。

製造販売業者

株式会社**トップ**

本社: 〒120-0035 東京都足立区千住中居町19番10号
https://www.top-tokyo.co.jp/

東京支店 ☎03-3811-9915
札幌営業所 ☎011-820-8383
千葉営業所 ☎043-214-1641
静岡営業所 ☎054-260-7811
広島営業所 ☎082-246-7651

名古屋支店 ☎052-834-3333
盛岡営業所 ☎019-645-3452
横浜営業所 ☎045-820-3330
京都営業所 ☎075-366-9622
鹿児島営業所 ☎099-214-7320

大阪支店 ☎06-6361-5831
仙台営業所 ☎022-265-3610
新潟営業所 ☎025-244-2191
神戸営業所 ☎078-230-2360

福岡支店 ☎092-472-4233
北関東営業所 ☎048-685-5797
金沢営業所 ☎076-268-3370
高松営業所 ☎087-866-5691


AD032503



THE TOP IN QUALITY
for all areas of healthcare

トップ シリンジポンプ TOP-S500

2003医療事故防止対策通知*対応

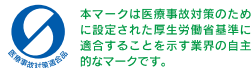

本マークは医療事故対策のために設定された厚生労働省基準に適合することを示す業界の自主的なマークです。

*関連企業を対象とした厚生労働省通知
「輸液ポンプ等に関する医療事故防止対策について」
医薬発第0318001号：平成15年3月18日



THE STANDARD

シンプルで扱いやすい シリンジポンプのご提案

1.3kg

従来比約35%軽量

※トップシリンジポンプTOP-5500との比較



左から右へ順を追った操作 > > >

電源ONから送液開始まで一連の操作がスムーズに行えます。

注入を継続したまま 流量変更が可能

注入の停止をすることなく
流量変更が行えます。

乾電池駆動

災害時等での電源が確保でき
ない環境下においても、乾電
池での駆動が可能です。

異常発生時は、音に加えて光でお知らせ

警報発生時、原因となる部分が赤く点灯するため、原因部分が発見しやすくなっています。



ガイドライト

早送り、開始、停止キーのライトが次の
操作を促します。



清掃がしやすいなめらかな形状

定期清掃が行いやすいよう、凹凸・溝を
抑えた形状となっています。



流量設定が小数第2位まで設定可能

最低流量設定が0.01 mL/hから設定可能となっており、投与する薬剤に合わせて幅広い範囲で流量設定が可能です。
(0.01 mL/hから1200.00 mL/h)